

# Softform<sup>®</sup> Premier Active 2

met Active 2 RX innovatieve digitale pomp



De complete, cliëntgerichte oplossing

EENVOUDIG IN GEBRUIK | INNOVATIEVE DIGITALE POMP |  
MODULAIR OPGEBOUWD

**INVACARE**  
Yes, you can.®

# Een dynamische ondersteuning voor betere drukverlichting

Met het doel zorgprofessionals een dynamische, therapeutische ondersteuning te bieden - met verschillende niveaus van drukverlaging - hebben wij de **Active 2 RX innovatieve digitale pomp** aan het **Softform Premier** foam matras gekoppeld en zo de **Softform Premier Active 2** gecreëerd.

De toevoeging van de pomp zorgt voor een optimale cliëntondersteuning, met actief wisselende luchtcellen, geactiveerd met één druk op de knop.

Door het gebruik van de innovatieve digitale pomp in combinatie met het klinisch bewezen **Softform Premier** matras helpen deze wisselende luchtcellen bij het voorkomen van drukplekken door optimale ondersteuning te bieden.

## Statisch oppervlak voor "zeer hoog risico" op decubitus


Een speciaal gesneden, kwalitatief hoogwaardige foam bovenkant. Maakt effectief gebruik van contouren van het lichaam als het gaat om micro-klimaatmanagement en drukverdeling. Biedt comfortabele en effectieve drukverdeling voor cliënten met een "zeer hoog risico" op decubitus. Het statische oppervlak kan eenvoudig opgeschaald worden door activering van de innovatieve digitale pomp, in een verdergaande behandeling van drukplekken.

## Een complete cliëntgerichte oplossing

Het **Softform Premier Active 2** matras combineert de drukverlagende kwaliteiten van de speciaal gesneden foam bovenlaag met de flexibele luchtcompartimenten daaronder. Deze kunnen, indien noodzakelijk, afzonderlijk gevuld worden voor een dynamische behandeling.

Deze opbouw zorgt ervoor dat de cliënt altijd ondersteund wordt door de kwalitatief hoogwaardige foam\*, of de innovatieve digitale pomp (die de luchtcompartimenten activeert) nu aan of uit staat. Het comfortabele foam biedt te allen tijde effectieve drukverlaging en een hoog comfort.

\*(NICE Clinical Guide 179, September 2014)

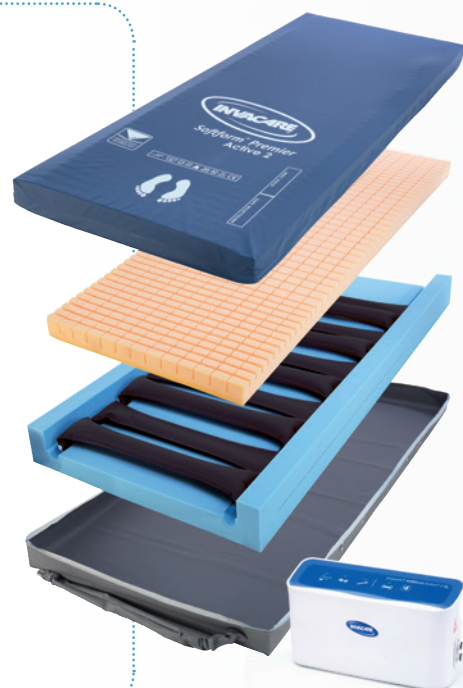

5

## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN IN EEN OOGOPSLAG

Van de modulaire opbouw tot de Plug'n'Play innovatieve digitale pomp

1

### Kwalitatief hoogwaardig Statisch foam oppervlak

- ▶ In het onverhoopte geval van stroomuitval ligt de cliënt nog steeds op een drukverlagend matras, geschikt voor mensen met een "zeer hoog risico" op decubitus.



2

### Plug'n'Play Innovatieve digitale pomp

- ▶ Een intuïtieve gebruikersinterface maakt de pomp eenvoudig op te zetten en te gebruiken.







3

### Kostenbesparing Modulaire opbouw

- ▶ Alle componenten zijn eenvoudig en betaalbaar te vervangen, wat bijdraagt aan een lagere "cost of ownership".



4

### Verminderde schuifkrachten Met glijmechanisme

- ▶ Een innovatief glijmechanisme vermindert schuifkrachten aanzienlijk wanneer de matras gebruikt wordt op een elektrisch verstelbaar bed (EPUAP, 2014).



5

### Automatisch instelbaar Systeem

- ▶ Er hoeven geen aanpassingen te worden gedaan met betrekking tot druk. De Active 2RX pomp levert optimale druk.

# Hybride matrassen

## Er zijn grofweg 2 types hybride matrassen

**1** ▶ Foam met een lage  
dichtheid in een laag  
wisselende luchtcellen.

**2** ▶ Kwalitatief hoogwaardige  
foamlaag bovenop een laag  
wisselende luchtcellen.

Hybride ondersteuning  
in "statische" stand ▼



▲ Kwalitatief hoogwaardige foamlaag in een  
lege luchtcel.



Hybride ondersteuning in  
"dynamische" stand ▼



▲ Lege luchtcel onder een kwalitatief  
hoogwaardige foamlaag



▶ Het eerste type hybride matras is vergelijkbaar met een niet-elektrisch hybride matras, maar biedt de mogelijkheid een innovatieve digitale pomp toe te voegen.

### Deze innovatieve digitale pomp heeft twee belangrijke functies:

1. Om te voorkomen dat er lucht uit het matras loopt
2. Om een vorm van wisselende drukondersteuning te bieden als opgeschaalde therapie

De wisselende ondersteuning die geboden wordt heeft een lage amplitude. Dit komt doordat de luchtcellen met een foamkern zijn gevuld. Hierdoor is het laten leeglopen, een essentieel onderdeel van wisselende ondersteuning, minder optimaal in vergelijking met traditionele ondersteuningsproducten.

## Technische gegevens ▼


Kijk voor uitgebreide informatie over dit product, zoals de gebruikshandleiding, op [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl).



Breedte ▼



Lengte ▼

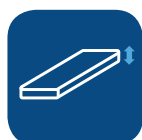

Hoogte ▼



Totaal gewicht ▼



Max. gebr. gewicht ▼



Max. reinigings-temperatuur ▼

### Softform Premier Active 2 Matras

830-855-880-900-1000-1030-1050-1150-1200 mm

1900-1930-1950-1970-1980-2000-2030-2050-2080-2010 mm

152 mm

14 kg

247,6 kg

80°



Diepte ▼



Breedte ▼



Hoogte ▼



Gewicht ▼

### Pomp

105 mm

275 mm

155 mm

1,75 kg

## Kleur ▼



Baltic Blue

Let op: kleuren kunnen licht afwijken van het hierboven getoonde.

## Wettelijke gegevens ▼

### Matras gefabriceerd volgens:

Europese Norm: BS EN 597-1 Cig  
Europese Norm: BS EN 597-2 Match  
BS7177:1996 Crib 5.

### Control Unit:

Geluidsniveau: ≤ 24 dB  
Cyclustijd: 10 minuten (1 in 2 cyclus)

### Brandweervoorschrift:

BS7177:2008

## Overige info ▼

- ▶ Kwalitatief hoogwaardig gesneden foam oppervlak
- ▶ Actieve ondersteuning wanneer nodig
- ▶ Klinisch bewezen voor alle categorieën decubitus\*
- ▶ Geschikt voor cliënten met zeer hoog / hoog risico
- ▶ Crib 5 of 7 brandvertragende hoesopties
- ▶ Maximum gebruikersgewicht 247,6 kg
- ▶ In verschillende maten verkrijgbaar

\* Klinische studie: Een retrospectieve analyse van het gebruik van de Invacare Softform Premier Active 2 in een zorginstelling.

Professionele zorg is essentieel bij het voorkomen van decubitus. Dit matras draagt op positieve wijze bij aan een zorgplan ter voorkoming van decubitus.

Scholing, klinische beoordeling en actie-gebaseerde planning op basis van kwetsbaarheid zijn fundamentele factoren als het gaat om decubituspreventie. Een range beoordelingsschalen kan gebruikt worden als formele methode van risicobepaling en zou ingezet moeten worden tezamen met informele beoordeling (die van de zorgverlener).

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland



Yes, you can.®