

Invacare® | **ScanBed 755**



Tot 200 kg

Wanneer comfort telt

Comfort, gebruiksgemak en veiligheid maken dit *Invacare ScanBed 755* het ideale bed voor elke verpleegsituatie - thuis of in een instelling.

ScanBed 755 biedt optimaal comfort en een ideale zitpositie met minimale wrijving. Verzorgers kunnen het bed zeer nauwkeurig afstellen op de individuele behoeften van de gebruiker.

En dankzij een unieke optie kan het **ScanBed 755** worden aangepast aan lange gebruikers door beide uiteinden van het bed te verlengen.

Zowel gebruikers als verzorgers profiteren van al deze praktische voordelen die zijn gericht op meer comfort en welzijn.



Yes, you can.®



Uw comfort is onze zorg

Het **ScanBed 755** kent diverse functies om de ideale zitpositie te creëren zonder overmatig schuiven of wrijving te veroorzaken. Zo is het virtuele draaipunt verder verbeterd, zijn de lengtes van de matrasbodemplaten geoptimaliseerd en kan het voeteneinde ook lager dan horizontaal ingesteld worden.

Invacare maakt producten voor elke gebruiker en daarom is dit bed voorzien van ingebouwde verlengstukken van 100 mm zowel aan hoofd- als voeteneinde, speciaal voor lange gebruikers.

Gebruiksvriendelijk

Het zwaarste onderdeel van het **ScanBed 755** weegt nog geen 25 kg en een demontabele schaar is als optie leverbaar.

Het (de)monteren van dit bed is extra eenvoudig gemaakt, zodat het gemakkelijk kan worden vervoerd en opgeslagen. In opslag rust dit bed op zijn onderstel, zodat het direct vanuit de vrachtwagen naar de slaapkamer kan worden vervoerd. Eén persoon kan het bed met minimale inspanning monteren en transporteren.

Veiligheid voorop

Zoals altijd staat bij Invacare de veiligheid voorop. De zijhekken in zowel de standaardlengte als de verlengde versie voldoen aan de strengere eisen van de nieuwe IEC-normen voor verpleegbed-


den, zonder nadelige effecten voor de ergonomie of de arbeidsomstandigheden van de verzorger.

Eigenschappen en opties



Verbeterd virtueel draaipunt

Meer comfort bij veranderen van de zitpositie, lagere schuif- en wrijfkraften

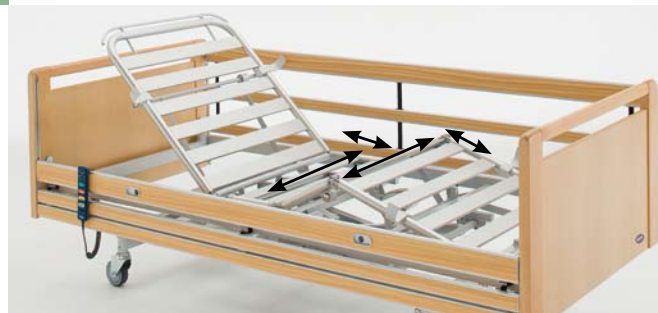

Geoptimaliseerde matrasbodemplatenverdeling op basis van ergonomisch onderzoek, voor meer comfort.



Bedverlenging

Uitschuifbare matrasbodem. 100 mm extra bij hoofd- en voetendeel. Bed is eenvoudig 50, 100, 150 of 200 mm te verlengen.

Eigenschappen en opties




Line zijhekken

Deze zijhekken beschermen over de volledige lengte van het bed en voldoen nu al aan de strengere eisen voor stijfheid en veiligheid die voor verpleegbedden zullen gaan gelden (IEC 6060 1-2-52_FDIS). De Line zijhekken zijn licht in gewicht en gebruiksvriendelijk.



Line uitschuifbare zijhekken

Deze uitschuifbare zijhekken beschermen over de volledige lengte van het bed, van 2000 tot 2200 mm, en voldoen nu al aan de strengere eisen die voor verpleegbedden zullen gaan gelden (IEC 6060 1-2-52_FDIS).

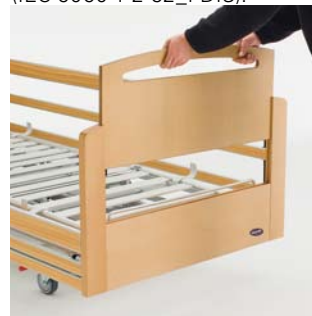

Uitneembaar paneel

Bij de Victoria bedeinden kan een paneel worden weggenomen, zodat u altijd gemakkelijk toegang heeft tot het hoofd- en voeteneinde, zelfs als er zijhekken zijn geplaatst.



ScanBed 755 D



U heeft geen gereedschap nodig om hoofd- en voeteneinde te verwijderen.

**Moet u het bed verplaatsen?
Is er geen lift?
Is de trap smal?**

...geen probleem!

Het **ScanBed 755 D** is speciaal ontworpen voor dit soort situaties. Dit bed is zo gemakkelijk te (de)monteren dat één persoon volstaat; ons unieke montagesysteem is ontworpen op gebruiksgemak. Het heeft geen schroeven of andere kleine onderdelen die zoek kunnen raken.

De losse onderdelen wegen nooit meer dan 25 kg per stuk. Dat maakt het nieuwe **ScanBed 755 D** uniek. Het ontwerp zorgt dat het bed gemakkelijk is te verplaatsen.



Het middendeel kan open en de twee matrasbodem delen kunnen uit elkaar. De matrasbodem zit met een snelkoppeling aan het onderstel vast.



De matrasbodem kan bij het middendeel gemakkelijk worden losgekoppeld.



De hendel van de snelsluiting ontkoppelt de schaar van het onderstel.



Ontgrendel de snelkoppeling om de schaar los te maken. De hendel maakt demonteren zeer gemakkelijk.



De losse onderdelen van het bed, de matras en de accessoires zijn met speciale haken direct op het onderstel te plaatsen; dit vergemakelijkt opslag en transport en het bed neemt minder ruimte in.

Eigenschappen en opties



Victoria beddeinden

Uitneembaar paneel - beuken, voor 850 en 900 mm brede bedden. Te combineren met Line zijhekken.



Sophie beddeinden

Leverbaar in beuken, voor 850 en 900 mm brede bedden. Te combineren met Line zijhekken.



Emma beddeinden

Afneembaar - Leverbaar in beuken, voor 850 en 900 mm brede bedden. Te combineren met stalen zijhekken.



Susanne beddeinden

Leverbaar in beuken, voor 850 en 900 mm brede bedden. Te combineren met Line zijhekken.



Anita beddeinden

Leverbaar in beuken, kersen en wit beuken voor 850 en 900 mm brede bedden. Te combineren met Line zijhekken.



Diverse handbedieningen:

Invacare **Soft Control** of standaard met "groene knop"-functie.




Papegaai

Het handvat is zowel in hoogte als in afstand verstelbaar.




Handgreep draaibaar

Zorgt voor goede ondersteuning om in een standaard positie te komen.

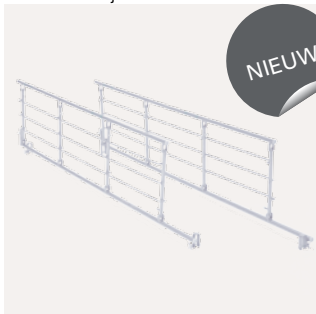


Invacare **Scala Basic 2**

Inklapbaar metalen onrusthek. Voldoet aan de nieuwe veiligheidsnorm voor beddekken IEC 60601-2-52.

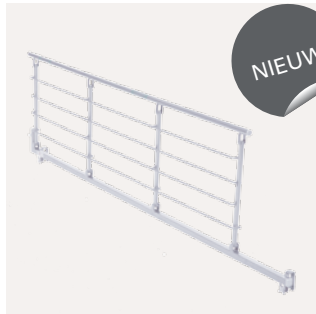

Invacare **Scala Medium 2**

Inklapbaar metalen onrusthek voor hogere matrassen. Voldoet aan de nieuwe veiligheidsnorm voor beddekken IEC 60601-2-52. 50 mm hoger dan **Scala Basic 2**.

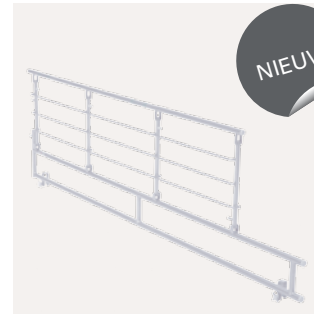

Invacare **Scala Decubi 2**

Inklapbaar metalen onrusthek voor extra hoge matrassen. Voldoet aan de nieuwe veiligheidsnorm voor beddekken IEC 60601-2-52. 100 mm hoger dan **Scala Basic 2**.



Centrale beremming

Leverbaar met wieldiameters van 100, 125 en 150 mm.



Gepolsterde bescherming

Zachte hoed die op z'n plaats blijft wanneer het hek wordt verlaagd.



Matrasbodem

Matrasbodem met naar keuze aluminium of houten latten.



Verlagingsset

Zwenkwieken van Ø 75 mm voor de laagste hoogte = 250 mm.

Technische gegevens

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| SB 755 | Breedte binnenmaat: 850 / 900 mm Breedte buitenmaat: 950 / 1010 mm | Lengte buitenmaat: 2130 mm Lengte binnenmaat: 2080 mm Matraslengte: 2000 mm | Instelbare hoogte: 350 - 820 mm Totale hoogte: 1600 - 2070 mm | Matrasbodemverdeling: 800 - 260 - 260 - 680 mm | Bodemvrijheid: 170 mm | Rughoekverstelling: 0° - 73° | Kniehoekverstelling: 0° - 28° |


| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---|--|
| | | | | | | |
| SB 755 | Minimale hoek onder frame: 0° - 16° | Beenhoekverstelling: 0° - 18° | 25° (hoek onder frame) 14° (hoek boven frame) | Zwaarste onderdeel: 25 kg | Belastbaar gewicht 235 kg Max. gebruikersgewicht: 200 kg | |

NB/ Dit bed is niet geschikt voor gebruik door patiënten jonger dan 12 jaar, of door patiënten met een lichaamslengte korter dan een gemiddelde 12-jarige.

Framekleur



Aluminium grijs

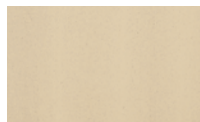

Beuken

Houtwerk



Beuken